

stryker

stryker

Tento dokument je určen výhradně k použití profesionálními zdravotníky.

Profesionální zdravotník musí při rozhodování o tom, zda použít určitý výrobek při ošetření konkrétního pacienta, vždy spoléhat na svůj profesionální klinický úsudek. Společnost Stryker neposkytuje lékařské rady a doporučuje profesionálním zdravotníkům, aby byli vyškoleni v používání všech produktů, než je použijí při ošetřování.

Uvedené informace jsou určeny k tomu, aby ukázaly šířku nabídky výrobků Stryker. Profesionální zdravotník musí před použitím jakéhokoli produktu Stryker vždy přihlížet k obsahu příbalového letáku, štítku výrobku a/nebo návodu k použití.

Produkty nemusí být dostupné na všech trzích, protože dostupnost produktu podléhá právním předpisům nebo lékařským postupům na jednotlivých trzích. Máte-li otázky k dostupnosti produktů Stryker, obraťte se na zástupce společnosti Stryker ve vaší oblasti.

Společnost Stryker Corporation nebo její divize či přidružené organizace společnosti vlastní nebo používají následující ochranné známky nebo servisní známky nebo o ně požádali: M-1 (Roll-in System), Performance-PRO XT, Power-LOAD Cot Fastener System, Power-PRO TL, Power-PRO XT, SMRT Power System, Stair-PRO, Performance-LOAD XPS, Steer-Lock System, Stair-TREAD, Rugged-X a Stryker. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků nebo držitelů.

Vyobrazené produkty jsou označeny symbolem CE v souladu s příslušnými nařízeními a směrnicemi EU.



MTX850 CZ

MTX850 CZ Rev. 1  
SDL 2019/02  
2017-15004

Copyright © 2019 Stryker  
stryker.com



# Vybavení EMS

## Katalog

# Obsah

# Obsah



## **Elektricky poháněný systém**

Upevňovací prvek na nosítka Power-LOAD 6390

Nosítka Power-PRO XT 6506

02-07

04-05

06-07



## **Hybridní systém**

Upevňovací prvek na nosítka Performance-LOAD 6392

K nosítkům Power-PRO XT 6506

08-11

10-11

06-07



## **Nosítka do ambulantních vozů**

Power-PRO TL 6550

Performance-PRO 6086

M1 6100

12-15

13

14

15



Systém SMRT

Stair-PRO 6252

Volitelné možnosti

Technické parametry produktu

16

17

18-19

20-21

# Elektricky poháněný systém

**Upevňovací systém na elektricky poháněná nosítka Power-LOAD k nosítkům Power-PRO XT s pohonem do ambulantních vozů**

## **Power-LOAD 6390**

**Upevňovací systém na nosítka s elektrickým nakládáním**

Zvedá a spouští nosítka do sanity a z ní; určeno ke snížení zatížení páteře a rizik kumulativních traumat. Upevňovací systém na nosítka Power-LOAD pomáhá zvyšovat bezpečnost obsluhy a pacienta, protože podpírá nosítka během nakládání a vykládání. Snížení zatížení páteře pomáhá předcházet kumulativním traumatům. Power-LOAD bezdrátově komunikuje s nosítky Power-PRO pro snadnost ovládání a pohodlí uživatele.

## **Power-PRO XT 6506**

**ambulantní elektricky poháněná nosítka**

Snižuje riziko úrazů při zvedání a spouštění. Zdravotníci trpí častým zatěžováním páteře v důsledku opakovaných pohybů, jako je zvedání, spouštění, přenášení a ohýbání. Používání systému Power-Pro XT může pomoci snížit zatěžování páteře, což může mít za následek nižší počet úrazů, neodpracovaných nebo zkrácených pracovních dnů a nákladů na pojištění.



# Power-LOAD 6390

## Upevňovací systém na nosítka s elektrickým nakládáním



IPX6  
AS/NZS-4535

BS EN-1789  
IEC-60601-1

- Zvedací ramena
- Indikátory LED v hlavové části
- Rukojeti k uvolnění nosítek
- Lineární přenosový systém
- Dvojitá kontrolka LED
- Ruční uvolňování vozíku
- Induktivní dobíjení
- Ovládací panel
- Indikátor akumulátoru
- Uvolňování v nožní části
- Bezpečnostní hák
- Vozík

### Indikátory LED v hlavové části

Informuje operátora o stavu polohy. Trvale zelená, je-li v požadované poloze nebo připraveno k přepravě; blikající žlutá, není-li v požadované poloze nebo není připraveno k přepravě.

### Ruční uvolňování nosítek

Umožňuje odjistit nosítka, jakmile jsou jejich kola na zemi.

### Lineární přenosový systém

Podpora a vedení nosítek během nakládání a vykládání.

### Ovládací panel s indikátorem baterie

Umožňuje kompletní ovládání nosítek s ručním zvedáním a také provoz elektricky poháněných nosítek v případě ztráty napájecího zdroje.

### Kompatibilita nosítek se systémem Power-LOAD

Power-PRO XT a Performance-PRO XT jsou kompatibilní se systémem Power-LOAD. Tento systém splňuje normy dynamických srážkových testů souvisejících s bezpečností přepravované osoby\* a automaticky dobíjí baterii Power-PRO XT SMRT.



Power-PRO XT



Performance-PRO XT

### Zvedací ramena

Baterií napájený hydraulický zvedací systém podpírá nosítka a pacienta během nakládání a vykládání.

\* Splňuje normy dynamických srážkových testů pro Power-PRO XT (AS/NZS-4535 a BS EN-1789) a Performance-PRO XT (BS EN-1789).

# Power-PRO XT\* 6506

## ambulantní elektricky poháněná nosítka



IPX6

IEC-60601-1

Nosítka Power-PRO XT byla navržena na základě důležitých informací od zdravotníků. Výsledkem jsou nosítka, která snižují potřebu ručního zvedání. Baterií napájený hydraulický systém zvedá a spouští pacienta na pouhý dotyk tlačítka\*\* a sklápěcí hlavová část lůžka zkracuje nosítka ke snadné manipulaci v rozsahu 360 stupňů v kterékoli výškové poloze.



### Životnost XPS

Vyvinuto pro dlouhou životnost s hliníkovým jádrem.



### Rukojeti k uvolnění XPS

Udržují ruce v dostatečné vzdálenosti od mechanismů nosítek.



## XPS

### Rozšiřitelná plocha pro pacienta

Komplexní řešení pro celou řadu pacientů a prostředí.

XPS poskytuje rozšířenou plochu pro pacienta, kterou lze snadno osadit na kompatibilní nosítka\*. XPS lze seřídit v sedmi aretovatelných polohách a zahrnuje širší matraci, která snižuje mezeru při přepravě a je konstruována s ohledem na pohodlí pacienta. Toto řešení pomáhá zvládnout trendy rostoucí obezity a podporuje různé pacienty a prostředí.



1 Šoková poloha, nohy natažené nebo volitelná poloha s pokrčenými koleny

2 Sklápěcí postranice

3 Hydraulický systém zvedání

4 Zvedání v hlavové a nožní části a část rukojetí

5 Ovladače v nožní části

6 Pneumaticky podpíraná opěrka zad

7 Nastavitelná nakládací výška s funkcí krokování

8 XPS

9 Sklápěcí hlavová část



# 318 kg

**nosnost**

\* Splňuje normy dynamických srážkových testů (AS/NZS-4535 a BS EN-1789) ve spojení s Power-LOAD.

\*\* Nosnost 318 kg se zvedací kapacitou bez podpory 227 kg. (Zatížení nosítek hmotností překračující 136 kg může vyžadovat další pomoc ke splnění nastavené nakládací výšky.)

Nosítka odpovídají normě BS EN 1865-2:2010+A1:2015 s volitelnou zářadovou částí 1865 (6506-012-004).

Nosítka odpovídají normě BS EN 1865-3:2012+A1:2015 s volitelnou XPS (6506-040-000).

\*Power-PRO XT, Power-PRO TL a Performance-PRO XT

# Hybridní systém

**Systém upevňovacích prvků na nosítkách Performance-LOAD s ručním nakládáním spolu s ambulantním elektricky poháněnými nosítky Power-PRO XT**



## **Performance-LOAD 6392**

**upevňovací systém na nosítka s manuálním nakládáním**

Systém upevňovacích prvků Performance-LOAD nosítek s manuálním zvedáním pomáhá zvýšit bezpečnost pečovatele a pacienta tím, že vede nosítka při nakládání a vykládání a zabezpečuje nosítka během přepravy.



## **Power-PRO XT 6506**

**ambulantní elektricky poháněná nosítka**

Snižuje riziko úrazů při zvedání a spouštění. Zdravotníci trpí častým zatěžováním páteře v důsledku opakovaných pohybů, jako je zvedání, spouštění, přenášení a ohýbání. Používání systému Power-Pro XT může pomoci snížit zatěžování páteře, což může mít za následek nižší počet úrazů, neodpracovaných nebo zkrácených pracovních dnů a nákladů na pojištění.



#### Lineární přenosový systém

Pomáhá s vedením a centrováním nosítek během nakládání a vykládání

#### Zajištění hlavové části

Zajišťuje hlavovou část nosítek na místě v přepravní poloze

#### Západka v nožní části

Zajišťuje nožní část nosítek na místě v přepravní poloze

#### Snímatelná sada nástrojů

Performance-LOAD lze demontovat pro lepší čištění a údržbu

#### Indukční dobíjení (volitelně)

Dobíjí baterii SMRT v přepravní poloze (není třeba kabel ani konektory)

#### Možnost uvolnění na straně u nohou

Umožňuje odjistit nosítka od systému Performance-LOAD

#### Adaptabilní podlahová deska a bezpečnostní hák

Určeno k instalaci a kompatibilitě s technologiemi Power-LOAD. Bezpečnostní hák se připojí k bezpečnostnímu sloupku nosítek během nakládání a vykládání



## Performance-LOAD 6392

### upevňovací systém na nosítka s manuálním nakládáním

|                                                                                          |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| c  US | IPX6        | BS EN-1789  |
|                                                                                          | AS/NZS-4535 | IEC-60601-1 |

- Splňuje normy dynamických srážkových testů AS/NZS-4535 a BS EN-1789
- Vedené podpory k nakládání a vykládání zvyšují efektivitu uživatele omezením vybočování nosítek
- Strategicky navrženo s možností budoucích úprav na podporu našeho upevňovacího systému Power-LOAD
- Volitelně indukční nabíjení pro baterie SMRT
- Rozměry odpovídající potřebám pacienta s možností montáže na stěnu nebo na podlahu a odpovídající upevňovací prostředky
- Omyvatelné tlakovou myčkou a demontovatelné k dekontaminaci

#### Kompatibilita s nosítky Performance-LOAD

Power-PRO XT je kompatibilní se systémem Performance-LOAD. Systém splňuje normy dynamických srážkových testů AS/NZS-4535 a BS EN-1789 ve spojení s Power-PRO XT. Volitelně indukční nabíjení automaticky dobíjí baterie SMRT



Ambulantní nosítka Power-PRO XT


# Ambulantní nosítka

## Power-PRO TL 6550 Ambulantní elektricky poháněná nosítka

Nosítka Power-PRO TL pomáhají snižovat zatěžování páteře, snižuje riziko kumulativních traumatických úrazů zdravotníků.

### Klíčové vlastnosti

- 1 Pneumaticky podpíraná opěrka zad
- 2 Pevné tlačné tyče (volitelně)
- 3 Sklápěcí hlavová a nožní část
- 4 Hydraulický systém zvedání
- 5 Křížový rám patentovaný v USA

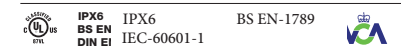

Nosítka odpovídají normě BS EN 1865-2:2010+A1:2015 s volitelnou zádobou částí 1865 (6506-012-004).

Nosítka odpovídají normě BS EN 1865-3:2012+A1:2015 s volitelnou XPS (6506-040-000).



**318** kg  
nosnost

## Úchyt k podlaze 6385 Úchyt na kolejnici 6386 Systém upevnění nosítek

### Klíčové vlastnosti

- 1 Kompatibilní s ambulantními nosítky jiných dodavatelů
- 2 K dostání v konfiguracích úchytů k podlaze a úchytů k podlahovým kolejnícím
- 3 Svařovaná konstrukce z nerezové oceli pro bezkonkurenčně dlouhou životnost
- 4 Odpovídá normě BS EN-1789





## Performance-PRO XT\* 6086

### Ruční ambulantní nosítka

Performance-PRO XT jsou robustní nosítka s ručním ovládáním, s hliníkovým křížovým rámem. Všestranné a stabilní nosítka Performance-PRO XT mají nosnost 318 kg a sklápěcí hlavovou část ke snadné manipulaci v rozsahu 360 stupňů v kterékoli výškové poloze.

#### Klíčové vlastnosti

- 1 Šoková poloha, nohy natažené nebo volitelně poloha s pokrčenými koleny
- 2 Sklápěcí postranice
- 3 Bezpečnostní tyč s možností zvedání
- 4 Sklopná část u hlavy
- 5 Nastavitelná nakládací výška do tří poloh
- 6 Boční uvolňovací rukojeť
- 7 Možnost kompatibility se systémem Power-LOAD
- 8 Dvojí ovládání na konci u nohou k zajištění správného zvedání
- 9 Silná matrace



**318** kg  
nosnost

\* Splňuje normy dynamických srážkových testů (AS/NZS-4535 a BS EN-1789) ve spojení s Power-LOAD.



## Power-LOAD 6390

### Upevňovací systém na nosítka s elektrickým nakládáním

|                                                                                               |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|  <b>US</b> | IPX6        | BS EN-1789  |
|                                                                                               | AS/NZS-4535 | IEC-60601-1 |

Upevňovací systém na nosítka Power-LOAD pomáhá zvyšovat bezpečnost obsluhy a pacienta, protože podpírá nosítka během nakládání a vykládání. Snížení zatížení páteře pomáhá předcházet kumulativním traumatům. Power-LOAD bezdrátově komunikuje s nosítky Power-PRO pro snadnost ovládání a pohodlí uživatele.



## M-1 6100

### Pojízdná ambulantní nosítka

Pojízdný systém M-1 přináší snadné ovládání jen jednou osobou a snadnost používání. Snímatelná nosítka a systém Steer-Lock nabízejí vynikající možnosti manévrování

#### Klíčové vlastnosti

- 1 Zvedací rukojeti ve čtyřech rozích
- 2 Velká kolečka pro nízkou točivou sílu
- 3 Snímatelná nosítka
- 4 Šoková poloha, nohy natažené nebo volitelně poloha s pokrčenými koleny

|             |         |                                                                                     |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EN-1865-1   | EN-1789 |  |
| AS/NZS-4535 |         |                                                                                     |

Odpovídá bodům 4.1, 4.2 (s výjimkou 4.2.3), 4.4, 5.1 a 5.3 normy BS EN 1865-1:2010.

**227** kg  
nosnost



## Rovné vodítko k montáži uprostřed 6376

## DIN vodítko k montáži uprostřed 6373

#### Klíčové vlastnosti

- 1 Vnitřní systém vodítka udržuje vyrovnání nosítek během nakládání a vykládání
- 2 Konstrukce z nerezové oceli pro dlouhou životnost a odolnost proti rezivění
- 3 Údržba bez použití mazadel a možnost umývání tlakovou vodou pro snadné čištění
- 4 Uzamykací systém Inertia pomáhá zajistit konec nosítek u hlavy proti nárazu, což zvyšuje bezpečnost
- 5 Určeno ke snadné instalaci na podlahu nebo na systém kolejnic ambulantního vozu
- 6 Odpovídá normám BS EN-1789 a AS/NZS 4535



# SMRT napájecí systém

Napájecí systém SMRT zajišťuje nosítkům Power-PRO velký výkon. Jde o robustní, profesionální systém určený pro náročný svět EMS plný stresu. Napájecí systém SMRT eliminuje časově náročné a pracné protokoly nabíjení a „ladění“, které jsou obvykle třeba k zajištění spolehlivého, vysokého výkonu systémů bateriového napájení.



## Kompletní systém

- 1 Dvě soupravy SMRT
- 2 Nabíječka SMRT
- 3 Napájecí kabel

## Klíčové vlastnosti

- Kompletní nabíjení přibližně za dvě hodiny
- Baterie SMRT mají nulovou paměť
- Automatické řízení napájení prodlužuje životnost baterie
- Utěsněná trvanlivá konstrukce je odolná proti všem povětrnostním vlivům
- Nabíjení baterií SMRT kdykoli a kdekoli je to třeba

|  |                                                          |                      |
|--|----------------------------------------------------------|----------------------|
|  | ANSI/AAMI ES60601-1:2005<br>CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:08 | IEC-60601-1<br>IPX6* |
|--|----------------------------------------------------------|----------------------|

\*IPX6 se týká pouze baterie SMRT.

# Stair-PRO 6252 Křeslo na schodiště

Stair-PRO je jedno z křesel na schodiště na trhu, které umožňuje snížit výskyt úrazů<sup>1</sup>. Nezávislí odborníci na ergonomii zjistili, že ve srovnání s konkurenčními modely mají uživatelé křesla Stair-PRO snížené relativní riziko úrazů zad při přepravě pacientů po schodech nahoru nebo dolů.<sup>1</sup>



## Klíčové vlastnosti

- 1 Systém Stair-TREAD dopravuje pacienty dolů po schodech bez zvedání
- 2 Horní ovládací rukojeť poskytuje odpovídající výhled pro obsluhu a možnosti ovládání
- 3 Délka rukojeti je optimalizována pro pohyb nahoru po schodech
- 4 Anatomicky tvarované sedátko ABS
- 5 Výsuvné rukojeti na zvedání na straně u nohou



**Kompaktní velikost k uskladnění**  
**Možnost složení na 20 cm pro pohodlné uložení.**

1. Human Performance Institute, Dept of Industrial and Manufacturing Engineering. Březen 2002. Porovnání komerčních křesel k přepravě po schodech pomocí analýzy skupinových dat. Univerzita Western Michigan University.

## Příslušenství napájecího systému SMRT



12 V DC kabel (automobilový)



240 V AC – Evropa (CEE 7/16)

- 240 V AC – Spojené království (BS 1363A)
- 240 V AC – Austrálie (AS-3112 bez zemního kolíku)



Montážní držák nabíječky SMRT

## Příslušenství Stair-PRO



Nožní podpora



Držák O<sub>2</sub>



Spona IV

# Volitelné funkce

Zdokonalte své vybavení pomocí volitelného příslušenství. Na základě svých potřeb si vytvořte nosítka, která splní vaše potřeby. O úplném seznamu volitelného příslušenství se poraďte s prodejním zástupcem.



XPS



Systém uzamykání řízení



Poloha s pokrčenými koleny



Hák na vybavení



IV stojan (možnost 2 nebo 3 stupňů)



Dvojitě zámky kol



Nastavitelný nástavec opěrky hlavy



Základna pro defibrilátor



Bezpečnostní tyč s možností zvedání



Držák na O<sub>2</sub> u nohou



Držák na O<sub>2</sub> u hlavy



Sklápěcí hlavová část Držák na láhev O<sub>2</sub>



Snímatelný držák na O<sub>2</sub>



Úložná síť na základně



Úložný vak na opěradle



Příhrádka na ukládání u hlavy

## Rugged-X zádržné systémy

Zádržné systémy Rugged-X jsou polyuretanem potažené popruhy, které se snadno čistí. Popruhy s jasně žlutým potahem usnadňují viditelnost zádržného systému na nosítkách pro pečovatele, umožňují rozpoznat znečištění a urychlit čištění.



### Klíčové vlastnosti

- Spolehlivost:** Testováno v testech dynamických srážek – splňuje požadavky normy BS EN-1789.\* Jasná barva pomáhá pečovatelům identifikovat nečistoty na popruzích zádržných systémů.
- Trvanlivost:** Polyuretanový povlak chrání podkladovou tkaninu před poškozením v důsledku odírání. Určeno k použití za extrémních teplot v rozmezí -41 °C až +54 °C.
- Odolnost:** Potažené popruhy odolné proti znečištění usnadňují čištění zádržných systémů Rugged-X. Snadno omyvatelný polyuretanový povlak může pomoci zkrátit čas k vyčištění a usušení popruhů.



### Možnosti kompatibility

Zádržné systémy Rugged-X jsou kompatibilní s ambulantními nosítky Power-PRO XT, Performance-PRO XT a Power-PRO TL.

\* Splňuje požadavky normy BS EN-1789 na dynamické srážky s upevňovacím systémem nosítek Power-LOAD používaným s ambulantními nosítky Power-PRO XT, s upevňovacím systémem nosítek Power-LOAD používaným s ambulantními nosítky Performance-PRO XT, s upevňovacím systémem na nosítka Performance-LOAD používaným s ambulantními nosítky Power-PRO XT, ambulantními nosítky Power-PRO TL s upevňovacím systémem.

### Volitelné funkce k používání produktu

|                                           | Power-PRO XT 6506* | Performance-PRO XT 6086** | Power-PRO TL 6550 | M-1 6100 |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| XPS                                       | ●                  | ●                         | ●                 |          |
| Systém uzamykání řízení                   | ●                  |                           | ●                 | ●        |
| Poloha s pokrčenými koleny                | ●                  | ●                         | ●                 | ●        |
| Hák na vybavení                           | ●                  | ●                         | ●                 |          |
| IV stojan (možnost 2 nebo 3 stupňů)       | ●                  | ●                         | ●                 | ●        |
| Dvojitě zámky kol                         | ●                  | ●                         | ●                 |          |
| Nastavitelné prodloužení hlavové části    | ●                  | ●                         |                   | ●        |
| Základna pro defibrilátor                 | ●                  | ●                         | ●                 | ●        |
| Bezpečnostní tyč s možností zvedání       | STD                | STD                       |                   | STD      |
| Možnost držáku na láhev O <sub>2</sub>    |                    |                           |                   |          |
| Držák na O <sub>2</sub> v nohou           | ●                  | ●                         | ●                 |          |
| Držák na O <sub>2</sub> u hlavy           | ●                  | ●                         | ●                 |          |
| Zasouvací držák na O <sub>2</sub> u hlavy | ●                  | ●                         | ●                 |          |
| Snímatelný držák na O <sub>2</sub>        | ●                  | ●                         | ●                 | ●        |
| Možnosti ukládání                         |                    |                           |                   |          |
| Úložná síť na základně                    | ●                  | ●                         | ●                 |          |
| Úložný vak na opěradle                    | ●                  | ●                         | ●                 |          |
| Příhrádka na ukládání u hlavy             | ●                  | ●                         |                   |          |

\*Dříve model nosítek 6500, \*\*Dříve model nosítek 6085

# Model – technické parametry

| Specifikace nosítek                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |  |  |  |  |
| <b>Model</b>                                 | <b>Power-PRO XT</b>                                                               | <b>Power-PRO TL</b>                                                               | <b>Performance-PRO XT</b>                                                          | <b>M-1</b>                                                                          |
| <b>Číslo modelu</b>                          | 6506                                                                              | 6550                                                                              | 6086                                                                               | 6100                                                                                |
| Celková délka                                | 206 cm                                                                            | 206 cm                                                                            | 203 cm                                                                             | 197 cm                                                                              |
| <b>Délka</b>                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Standard                                     | 206 cm                                                                            | 194.3 cm                                                                          | 203 cm                                                                             | 197 cm                                                                              |
| Minimum                                      | 160 cm                                                                            | 139,7 cm)                                                                         | 163 cm                                                                             | Nehodí se                                                                           |
| <b>Celková šířka</b>                         | 58 cm                                                                             | 58 cm                                                                             | 58 cm                                                                              | 56 cm                                                                               |
| <b>Maximální nosnost</b>                     | 318 kg <sup>1</sup>                                                               | 318 kg <sup>1</sup>                                                               | 318 kg                                                                             | 227 kg                                                                              |
| <b>Rozsah výšek (k horní straně nosítek)</b> |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Vysoká poloha                                | 105 cm <sup>2</sup>                                                               | 105 cm <sup>2</sup>                                                               | 107 cm <sup>2</sup>                                                                | 100 cm <sup>2</sup>                                                                 |
| Nízká poloha                                 | 36 cm                                                                             | 36 cm                                                                             | 35 cm                                                                              | 37 cm                                                                               |
| <b>Hmotnost</b>                              | 57 kg <sup>3</sup>                                                                | 66 kg <sup>3</sup>                                                                | 40 kg <sup>4</sup>                                                                 | 55 kg <sup>4+</sup>                                                                 |
| <b>Sklon opěradla</b>                        | 0° – 75°                                                                          | 0° – 75°                                                                          | 0° – 73°                                                                           | 0° – 75°                                                                            |
| <b>Doporučená výška naložení</b>             | Do 91 cm <sup>5</sup>                                                             |                                                                                   | Do 86 cm <sup>6</sup>                                                              | Do 79 cm                                                                            |

1. Nosnost 318 kg se zvedací kapacitou 227 kg bez pomoci (zatížení nosítek nad 136 kg může vyžadovat další pomoc, aby byla splněna nastavená nakládací výška nosítek.)

2. Výška měřená od dolní strany matrace, v části sedadla, na úroveň země.

3. Nosítka se váží s jednou baterií, bez matrace a zádržného systému.

\*4. Nosítka se váží bez matrace a zádržného systému.

5. Vejde se na nakládací plošiny až do 91 cm Nakládací výška může být nastavena v rozsahu od 66 cm do 91 cm.

6. Nakládací výška může být nastavena v rozsahu od 66 cm do 86 cm.

7. Maximální nosnost představuje hmotnost pacienta. Bezpečná pracovní zátěž 395 kg představuje souhrn celkové hmotnosti lůžka a pacienta.

8. Rozměry se měří od zcela vnějších okrajů hlavního rámu. Specifikace se zaokrouhlují na nejbližší celé číslo. Převody se počítají před zaokrouhlením.

9. Rozměry hloubky se měří se zataženými vysouvacími rukojetmi.

10. Maximální nosnost je celková hmotnost rozložená v souladu se základní lidskou anatomií. EMT musí při stanovení celkové hmotnosti výrobku zvažovat hmotnost pacienta, vybavení a příslušenství.

\* Hmotnost nosítek vypočítaná s možnostmi pro pokrčení kolen a se základnou.

## Power-LOAD – upevňovací systém na nosítka

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Model</b>                         | <b>Power-LOAD</b>                         |
| <b>Číslo modelu</b>                  | 6390                                      |
| <b>Délka</b>                         |                                           |
| Celková                              | 241 cm                                    |
| Minimální                            | 228 cm                                    |
| <b>Šířka</b>                         | 62 cm                                     |
| <b>Hmotnost</b>                      |                                           |
| Celková hmotnost                     | 96,5 kg                                   |
| Modul podlahové desky                | 7,5 kg                                    |
| Modul kotvy                          | 10,5 kg                                   |
| Modul k převozu                      | 30,5 kg                                   |
| Modul vozíku                         | 48 kg                                     |
| <b>Maximální nosnost<sup>7</sup></b> | 318 kg                                    |
| <b>Minimální počet pracovníků</b>    |                                           |
| Obsazená nosítka                     | 2                                         |
| Neobsazená nosítka                   | 1                                         |
| <b>Doporučená výška nakládání</b>    | 56 cm až 91 cm                            |
| <b>Baterie</b>                       | 12 V, 5 Ah olověná baterie (6390-001-468) |

|                                        |                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |  |
| <b>Model</b>                           | <b>Stair-PRO</b>                                                                      |
| <b>Číslo modelu</b>                    | 6252                                                                                  |
| <b>Výška</b>                           | 95 cm                                                                                 |
| <b>Šířka</b>                           | 52 cm                                                                                 |
| <b>Hloubka<sup>9</sup></b>             | 71 cm                                                                                 |
| <b>Složená hloubka</b>                 | 20 cm                                                                                 |
| <b>Hmotnost</b>                        | 14 kg                                                                                 |
| <b>Maximální zatížení<sup>10</sup></b> | 227 kg                                                                                |

## UPEVNŮVACÍ PRVEK na nosítka Performance-LOAD

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Model</b>                      | <b>Performance-LOAD</b> |
| <b>Číslo modelu</b>               | 6392                    |
| <b>Délka</b>                      |                         |
| Celková                           | 178 cm                  |
| Délka se zahrnutím pacienta       | 203 cm                  |
| <b>Šířka</b>                      |                         |
| U nohou                           | 23 cm                   |
| U hlavy                           | 48 cm                   |
| <b>Hmotnost</b>                   |                         |
| Celková hmotnost                  | 28,5 kg                 |
| Modul podlahové desky             | 7,5 kg                  |
| Upevňovací modul                  | 21 kg                   |
| <b>Výška</b>                      | 15 cm                   |
| Minimální počet pracovníků        |                         |
| Obsazená nosítka                  | 2                       |
| Neobsazená nosítka                | 1                       |
| <b>Doporučená výška nakládání</b> | 56 cm až 91 cm          |